

**Bitte ausschließlich Wachmodellationen verwenden  
(keine Tiefziehkäppchen)!**

Diese Angaben gelten nur für die Verwendung von System **Thermofix 2000**


**Angaben bezogen auf 160g!**

**Bestandteile:**

- 1) Vestofix (Einbettmasse)
- 2) Trichterformer
- 3) Schiene
- 4) Thermofix (Ringfolie)
- 5) Silikonspray
- 6) Niadur, BiodurSoft o. ä.

<b>NE-Legierungen Ni-Cr, Co-Cr</b>
<b>160 g = 38 ml</b>
11 ml H <sub>2</sub> O → 27 Expansionsliquid <b>(exakte Passung)</b>
13 ml H <sub>2</sub> O → 25 ml Expansionsliquid <b>(strenge Passung)</b>

<b>38 ml = 100%</b>		
<b>Liquid</b>		<b>H<sub>2</sub>O dest.</b>
<b>ml</b>	<b>Prozent</b>	<b>ml</b>
15	ca.39%	23
16	ca.42%	22
17	ca.45%	21
18	ca.47%	20
19	ca.50%	19
20	ca.53%	18
21	ca.55%	17
22	ca.58%	16
23	ca.60%	15
24	ca.63%	14
25	ca.66%	13
26	ca.68%	12
27	ca.71%	11
28	ca.74%	10
29	ca.76%	9
30	ca.79%	8

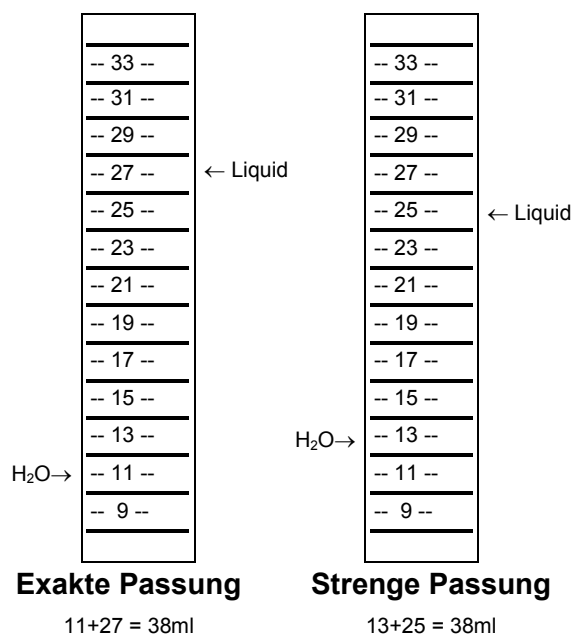

**1ml Expansionsliquid mehr = 3% (höhere Expansion)**

Weitere Auskünfte per mail: [info@dfs-diamon.de](mailto:info@dfs-diamon.de)

**Hersteller:**

DFS-Diamon GmbH \* Ländenstraße 1 \* D-93339 Riedenburg \* +49 9442 91890

Rev. 11/14