


## UPOFIX® - Perii de lustruit

Perii	Aplicare	Domeniu de aplicare
0	Lustruirea	tuturor metalelor
I	Pre-lustruirea	tuturor metalelor
II	Lustruire finală	tuturor metalelor
III	Pre-lustruire	ceramicii
IV	Lustruire finală	ceramicii
IV	Pre-lustruire	compozit
V	Lustruire finală	compozit

Atenție: 3' – 5.000 UpM ( încet cu mărirea progresivă a forței de apăsare)

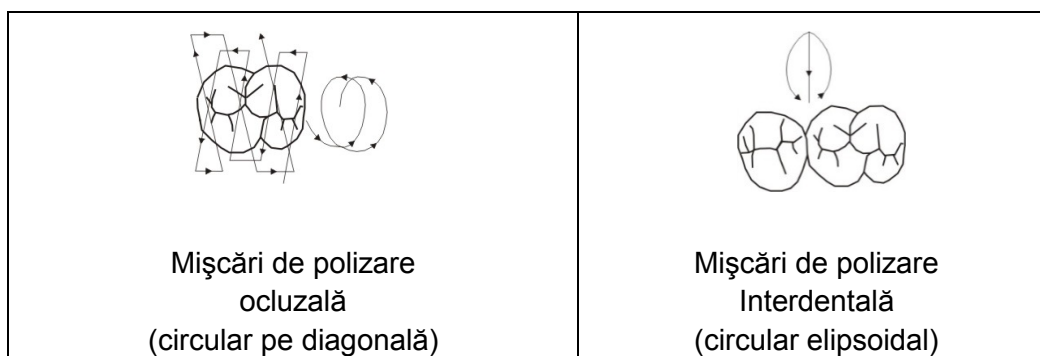

Turații lente – 3000 rpm și mărirea progresică a forței de apăsare : (Pre-)Lustruire grosieră

Turații mari 3000-5000 rpm cu scăderea ușoară a forței până la 0: Lustruire finală.

Pentru mai multe informații vezi descrierea din catalogul de laborator.

### **Producător:**

DFS-Diamon GmbH \* Ländenstraße 1 \* D-93339 Riedenburg \* +49 9442 91890

Rev. 12/14