


UPOFIX® - STRUMENTI PER LUCIDATURA

Spazzole	Uso	Ambito d'uso
0	Lucidatura	Tutti i metalli
I	Pre-lucidatura	Tutti i metalli
II	Lucidatura a specchio	Tutti i metalli
III	Pre-lucidatura	Ceramica
IV	Lucidatura a specchio	Ceramica
IV	Pre-lucidatura	Composito
V	Lucidatura a specchio	Composito

Attenzione: 3' - 5.000 rpm (lento, con pressione maggiore)

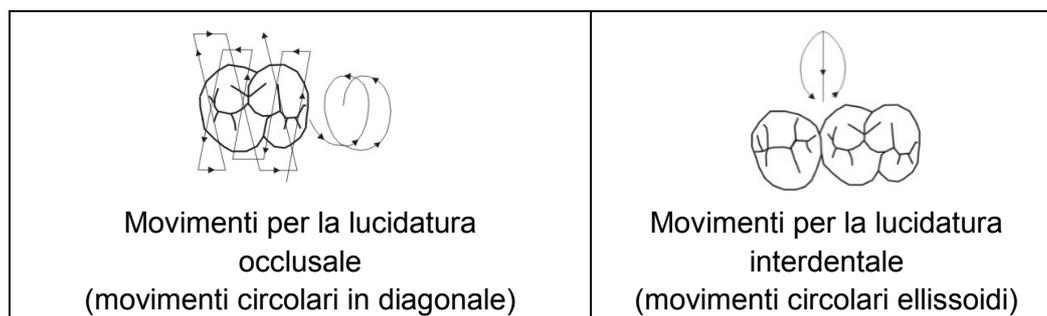

Velocità di rotazione lenta - 3000 rpm e pressione maggiore: (pre)lucidatura abrasiva

Velocità di rotazione maggiore - 3000-5000 rpm con pressione leggera o nulla: lucidatura finale.

Vedere anche le descrizioni sul catalogo per il laboratorio.

Produttore:

DFS-DIAMON GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 12/14