


UPOFIX® - POLÍROZÓ

Kefék	Alkalmazás	Alkalmazási
0	polírozás	minden fém
I	előpolírozás	minden fém
II	fényesre polírozás	minden fém
III	előpolírozás	kerámia
IV	fényesre polírozás	kerámia
IV	előpolírozás	kompozitból
V	fényesre polírozás	kompozitból

Figyelem: 3' – 5.000 UpM (lassan, növekvő erejű lenyomással)

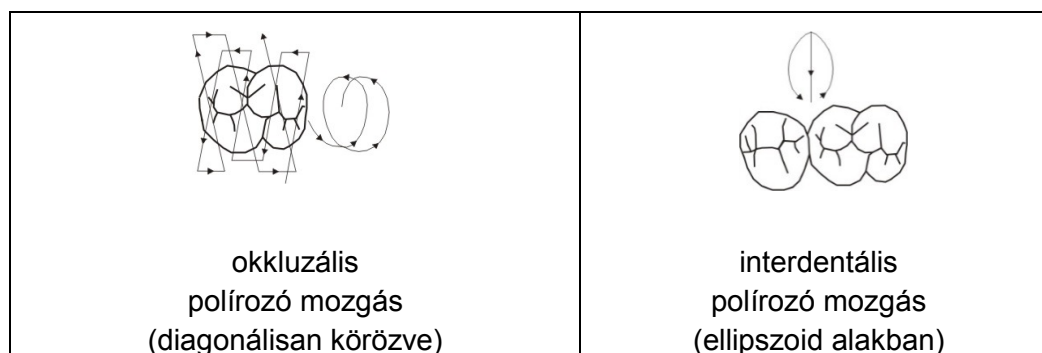

Lassú fordulatszámok – 3000 UpM és növekvő erejű lenyomás: Abrázív (elő)polírozás

Növekvő fordulatszámok 3000-5000 UpM enyhe nyomással vagy nyomás nélkül: végső polítúr

További információkról lásd a laboratóriumi katalógusban lévő leírást

Gyártó:

DFS-Diamon GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 12/14